

## CONTAK RENEWAL<sup>®</sup> 3 y 4 *Apriete los ocho (8) tornillos*

### Información de Soporte

Al igual que los desfibriladores para terapia de resincronización cardíaca (TRC-D) CONTAK RENEWAL 1 y 2, los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4 llevan un total de ocho (8) tornillos que deben apretarse al conectar los electrodos al generador de impulsos. Sin embargo, las posiciones de estos tornillos han cambiado en los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4.

Este artículo se publicó por primera vez como Actualización de Producto el septiembre de 2003.

Los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4 llevan un total de ocho (8) tornillos que deben apretarse al conectar los electrodos al generador de impulsos. Tal y como se muestra en el siguiente diagrama, cuatro (4) tornillos están ubicados en la parte superior del conector (figura 1), tres (3) en la parte posterior del conector (figura 2), y uno (1) en la parte delantera del conector (figura 3).

**Recuerde: Debe apretar todos los tornillos en los TRC-D CONTAK RENEWAL 3 y 4.**

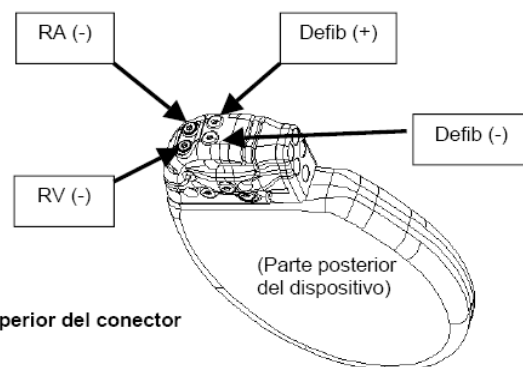


Figura 1. Parte superior del conector

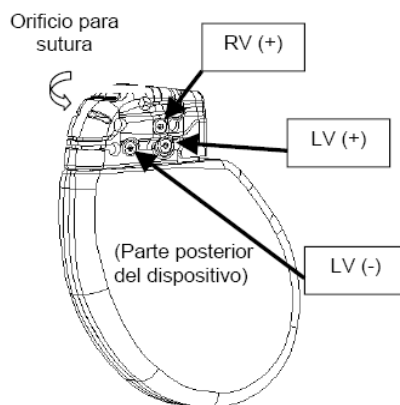


Figura 2. Parte posterior del conector

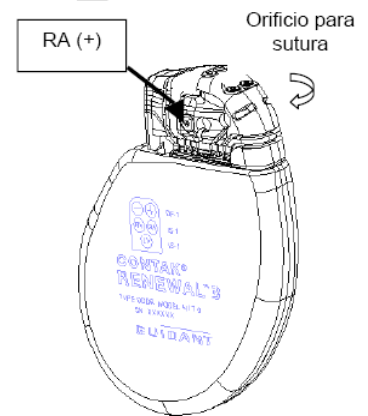


Figura 3. Parte delantera del conector

### Productos CRM a los que se hace referencia\*

CONTAK RENEWAL 3 y 4

\*Los productos a los que se hace referencia pueden no estar aprobados en todos los países.

### Información CRM de contacto

Servicios Técnicos – EE. UU.  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
[Tech.Services@guidant.com](mailto:Tech.Services@guidant.com)

Servicios Técnicos - Europa  
+32 2 416 7222  
[eurtechservice@guidant.com](mailto:eurtechservice@guidant.com)

Soporte Clínico para LATITUDE  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
[latitude@guidant.com](mailto:latitude@guidant.com)

Servicios a Pacientes  
1.866.484.3268 – EE. UU. y Canadá  
001.651.582.4000 – Internacional